




Nenänieluinunäytteen ottaminen

Kerää näytteenottovälineet

1. Limaimukatetri yhdistäjällä
2. Imukatetri
3. Imu
4. Imuletku
5. Steriili keittosuola (tarvittaessa limaimukatetrin kostutukseen)
6. Vesiasia (näytteenoton jälkeen imuletkun puhdistamiseen)

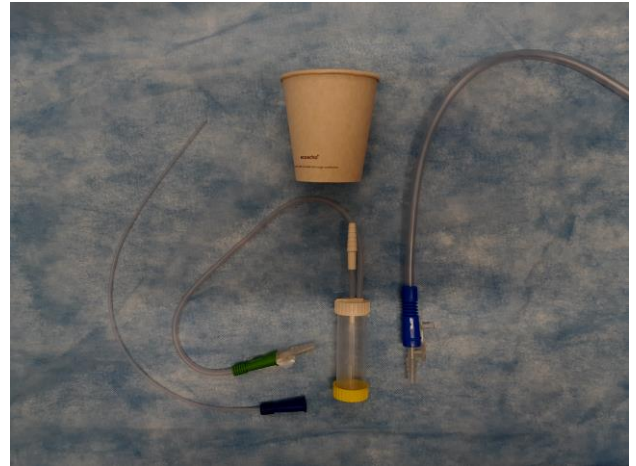

- Muista käsien desinfektio.
- Kytke imu limanäyteputkeen.
- Kostuta sieraimia tarvittaessa noin 2 ml keittosuolalla.
- Työnnä limanäyteputken letku sieraimen kautta nenänieluun n. 4-5 cm:n syvyyteen. Ime limaa n. 2 ml. Ime samaan limanäyteputkeen näyte myös toiselta puolelta n. 2 ml

- Sulje limanäyteputki huolellisesti.
- Tarkista korkin tiiviys.
- Puhdista putken pinta eritetahran poistoon tarkoitetulla desinfektioaineella.
- Kiinnitä putkeen näytteenottopyynnön tarra
- Laita putki minigrippussiin.
- lähetä näyte mieluiten saman päivän aikana
- Näyte säilyy 1 – 3 vrk jääkaapissa

